



Línea Preanalítica

Catálogo de Productos

DIAGNOSTICS
M&H CARE | MEDICAL AND HOSPITAL CARE

 **Norstray & Nuart**

CONTENIDO

Tubos para Recolección de Sangre _____	02
Gel Separador + Activador de Coagulación _____	02
EDTA K2 _____	03
EDTA K3 _____	04
Citrato de Sodio 3.2% _____	05
Pro-Coagulación _____	06
Sin Aditivo _____	07
Heparina de Sodio y Litio _____	08
Fluoruro de Sodio y Oxalato de Potasio / Fluoruro de Sodio y EDTAK2 _____	09
 Agujas para Extracción de Sangre _____	 10
Agujas 21G y 22G _____	10





Gel Separador + Activador de Coagulación


Color: Amarillo.
Volúmenes: 4ml, 5ml y 6ml.

Generalmente utilizados en pruebas bioquímicas, de inmunología, entre otros; son ideales en los procesos de separación del suero, manteniendo estable sus componentes y propiedades durante largos períodos de evaluación.




Minitubos
Color: Amarillo.
Volúmenes: 0.5ml.


Volumen: 4ml
Tamaño: 13 x 75 mm

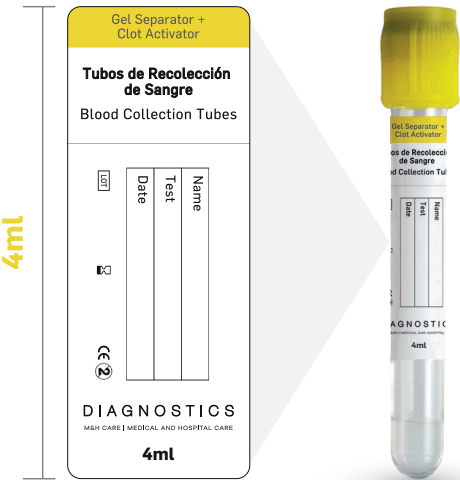


Volumen: 5ml
Tamaño: 13 x 100 mm

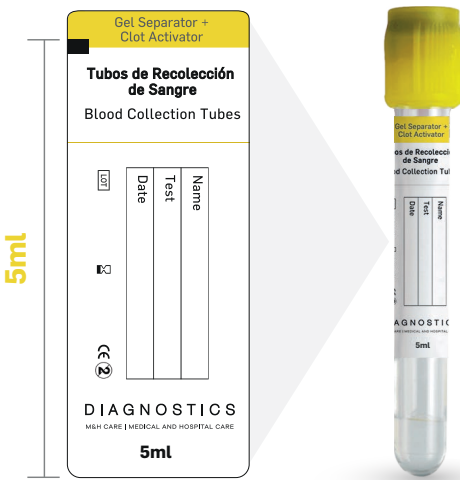

Volumen: 6ml
Tamaño: 13 x 100 mm

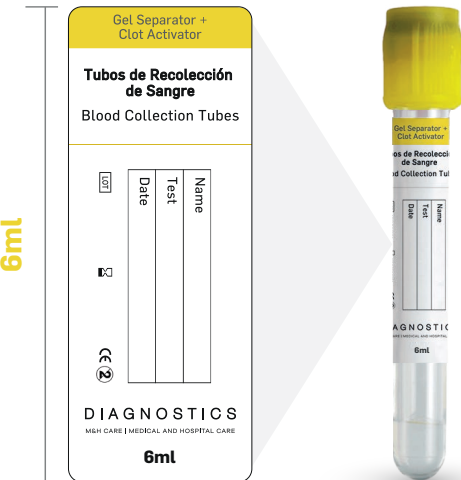

Volumen: 0.5ml
Tamaño: 10 x 45 mm

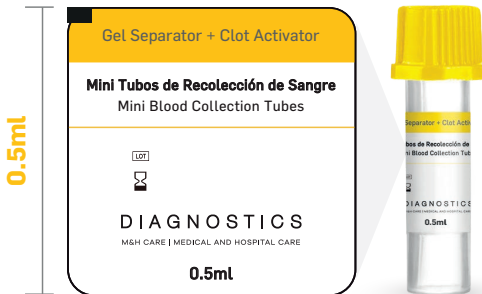




EDTA K2
Color: Lila.
Volúmenes: 2ml, 3ml y 4ml.

Los tubos con EDTA pueden ser utilizados para la recolección y conservación de especímenes de sangre para pruebas rutinarias y análisis completos. El ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) que se encuentra uniformemente en las paredes del tubo, permite la conservación de la morfología celular para su análisis.




Minitubos
Color: Lila.
Volúmenes: 0.5ml y 1ml.


Volumen: 2ml
Tamaño: 13 x 75 mm

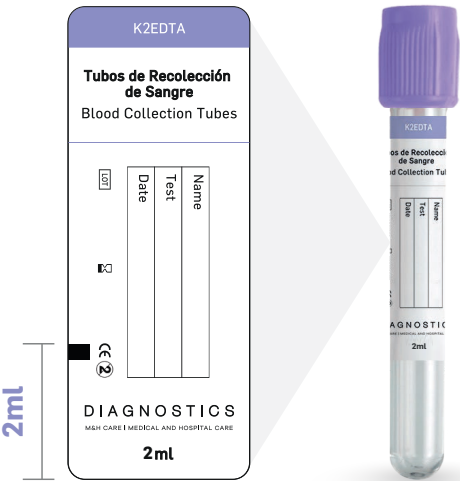


Volumen: 3ml
Tamaño: 13 x 75 mm

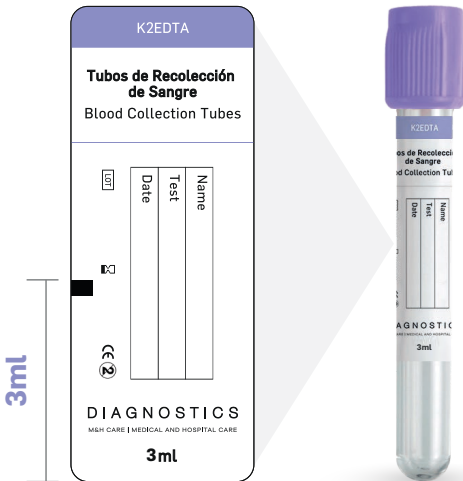

Volumen: 4ml
Tamaño: 13 x 75 mm

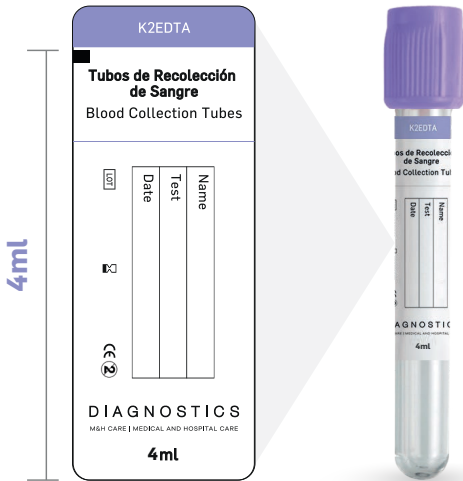

Volumen: 0.5ml
Tamaño: 10 x 45 mm

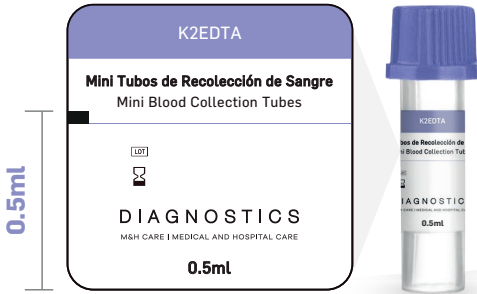

Tubos para Recolección de Sangre - EDTA K3

DIAGNOSTICS
M&H CARE | MEDICAL AND HOSPITAL CARE



EDTA K3

Color: Morado.
Volúmenes: 3ml y 4ml.


Los tubos con EDTA pueden ser utilizados para la recolección y conservación de especímenes de sangre para pruebas rutinarias y análisis completos, este aditivo (EDTA) se encuentra uniformemente en las paredes del tubo, permite la conservación de la morfología celular para su análisis.




Minitubos

Color: Morado.
Volúmenes: 0.5ml y 1ml.


Volumen: 3ml
Tamaño: 13 x 75 mm

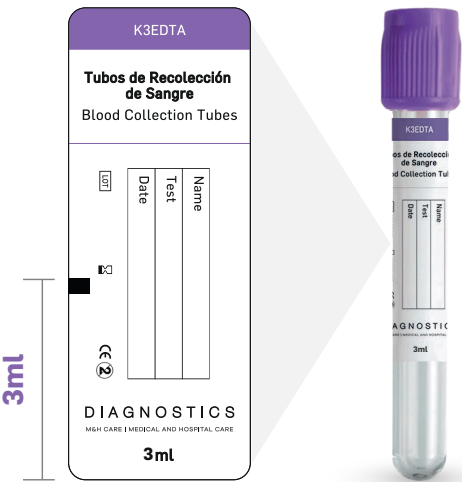


Volumen: 4ml
Tamaño: 13 x 75 mm

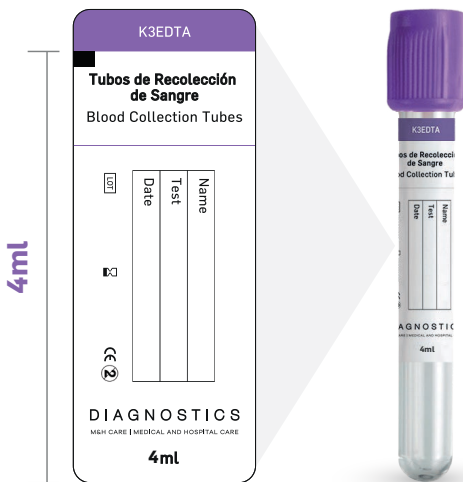

Volumen: 0.5ml
Tamaño: 10 x 45 mm

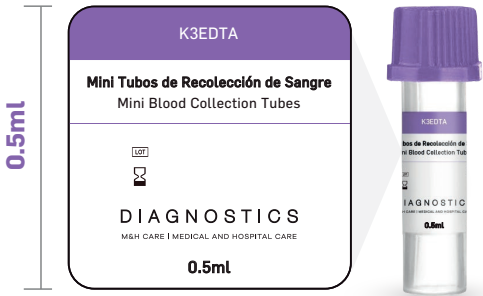

Volumen: 1ml
Tamaño: 10 x 45 mm

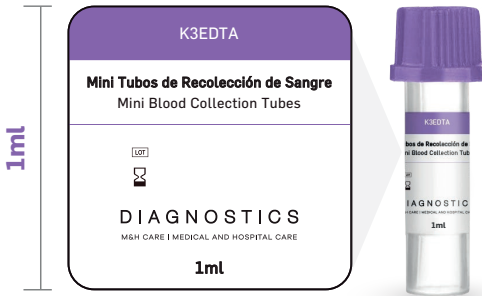


Tubos para Recolección de Sangre - Citrato de Sodio 3.2%




Citrato de Sodio 3.2%
Color: Azul.
Volúmenes: 1.8ml, 2ml, 3ml, 4ml y 4.5ml.

Los tubos con Citrato de Sodio 3.2% tienen una relación 1:9 entre anticoagulante y la muestra de sangre; es decir, 1 parte de Citrato de Sodio por 9 partes de sangre. Esta relación aditivo-sangre impide la coagulación y conserva los factores de la coagulación para su análisis.


Volumen: 1.8ml
Tamaño: 13 x 75 mm

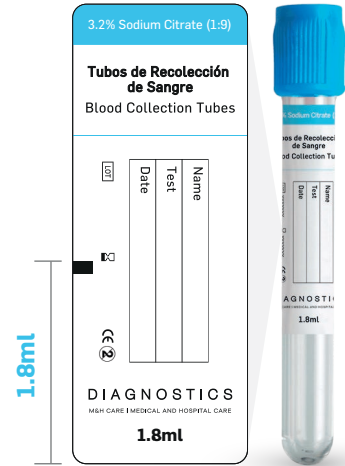

Volumen: 2ml
Tamaño: 13 x 75 mm

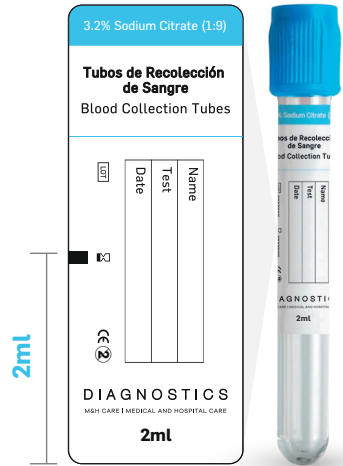

Volumen: 3ml
Tamaño: 13 x 75 mm

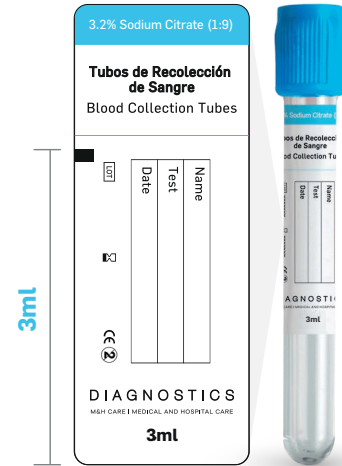

Volumen: 4ml
Tamaño: 13 x 75 mm



Volumen: 4.5ml
Tamaño: 13 x 75 mm





Pro-Coagulación

Color: Rojo.

Volúmenes: 6ml.

Los tubos Pro-Coagulación contienen coagulante uniformemente esparcido en las paredes del dispositivo. Utilizados generalmente para recolectar y preservar muestras de sangre para pruebas bioquímicas e inmunológicas.




Minitubos


Color: Rojo.

Volúmenes: 0.5ml y 1ml.


Volumen: 6ml
Tamaño: 13 x 100 mm

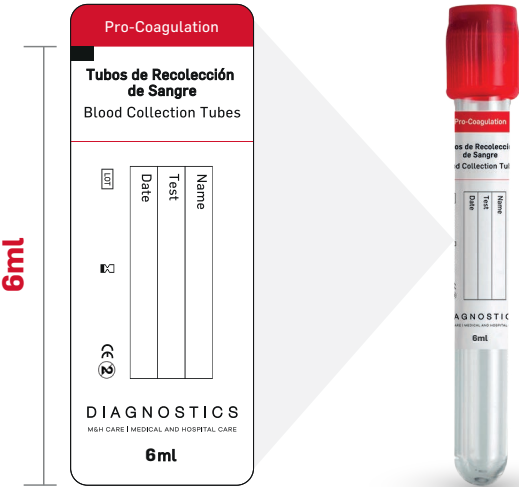

Volumen: 0.5ml
Tamaño: 10 x 45 mm

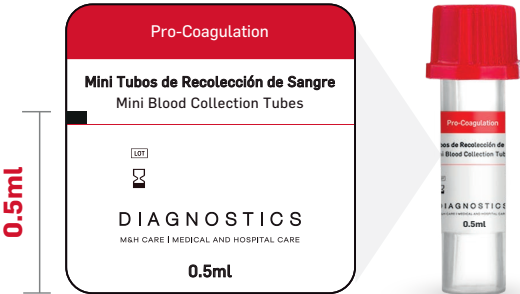

Volumen: 1ml
Tamaño: 10 x 45 mm

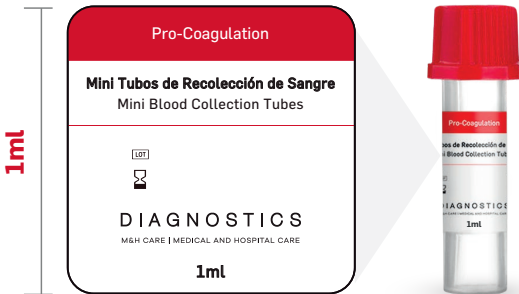





Sin Aditivo
Color: Rojo.
Volúmenes: 5ml y 6ml.

La superficie interna del tubo es lisa, favoreciendo el proceso de coagulación y evitando la hemólisis y adhesión de los glóbulos rojos a esta. El tubo rojo Sin Aditivo proporciona la suficiente muestra de suero para pruebas clínicas de tipo bioquímicas, de hematología, inmunología y serología; adicional el transporte de líquidos biológicos.

Volumen: 5ml
Tamaño: 13 x 75 mm

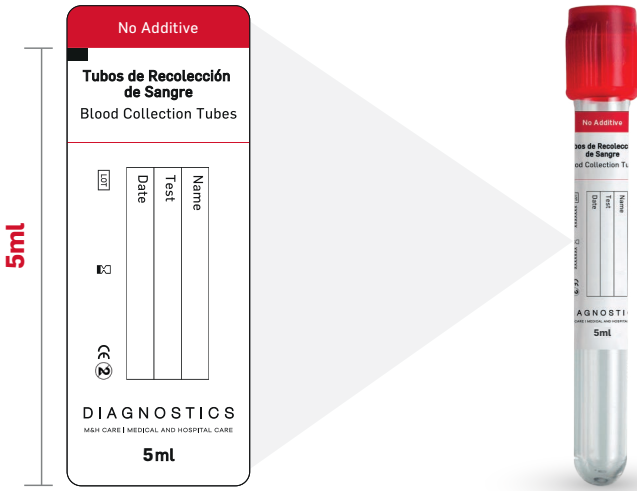

Volumen: 6ml
Tamaño: 13 x 100 mm

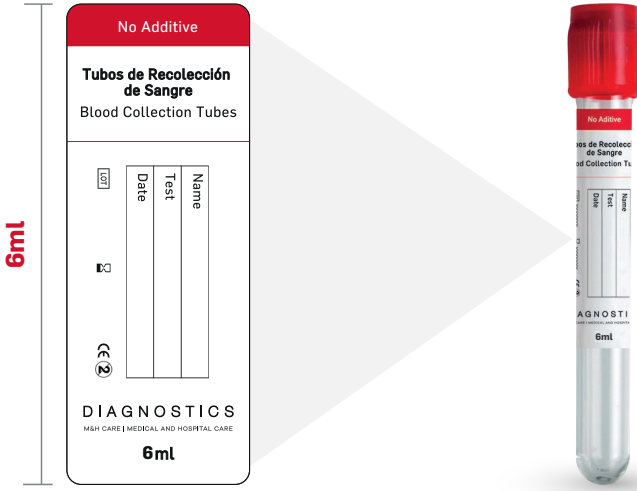




Heparina de Sodio y Litio


Color: Verde Claro y Verde Oscuro.
Volúmenes: 4ml.

Los tubos de recolección de sangre con Heparina en cualquiera de sus mezclas, son utilizados generalmente para pruebas clínicas de plasma, pruebas bioquímicas de emergencia y pruebas especializadas. La Heparina de Sodio o Litio, actúa rápidamente sobre la muestra de sangre, obteniendo plasma de alta calidad.

Heparina de Sodio - Verde Claro
Volumen: 4ml
Tamaño: 13 x 75 mm

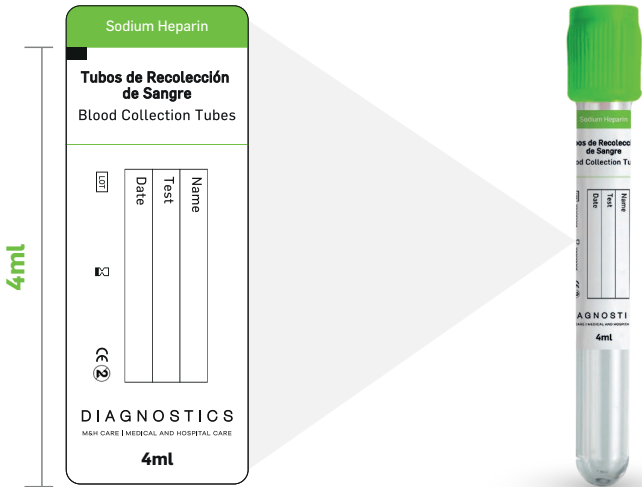

Heparina de Litio - Verde Oscuro
Volumen: 4ml
Tamaño: 13 x 75 mm

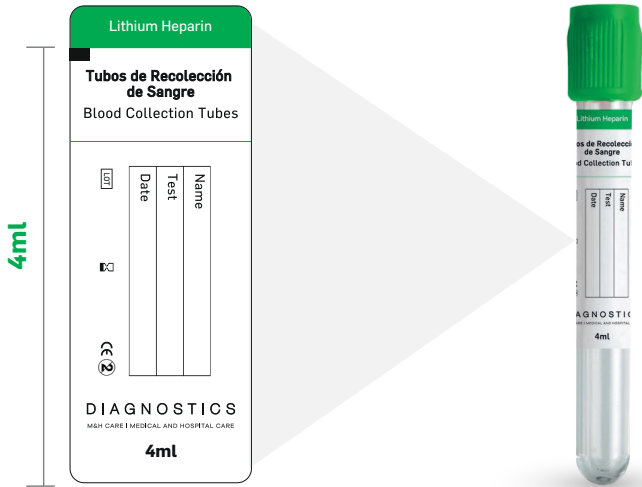




Fluoruro de Sodio y Oxalato de Potasio / Fluoruro de Sodio y EDTA K2

Color: Gris.


Volúmenes: 2ml y 4ml.

La combinación de Fluoruro de Sodio con otros aditivos en los tubos, permiten la determinación de los niveles de glucosa en la sangre y otros analitos.

Volumen: 2ml
Tamaño: 13 x 75 mm

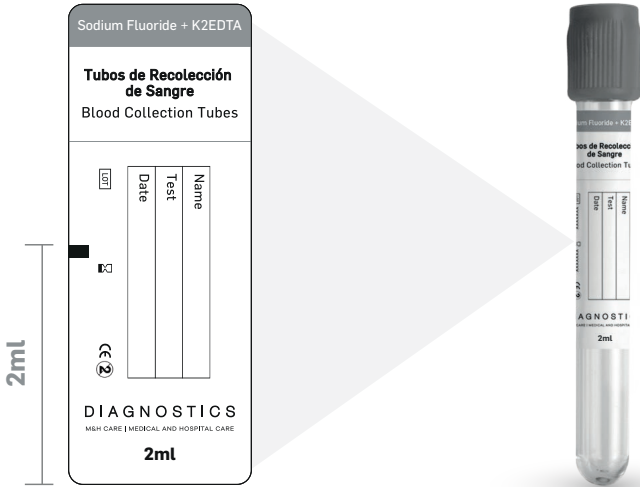

Volumen: 4ml
Tamaño: 13 x 75 mm

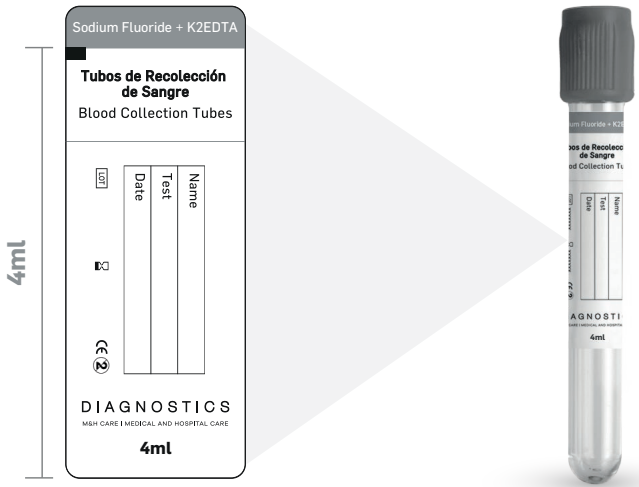

Las Agujas para Extracción de Sangre M&H Care, utilizadas con los tubos de la línea DIAGNOSTICS, favorecen la comodidad del paciente durante el proceso de venopunción.



Agujas para Extracción de Sangre 21G
Color: Verde.
Medidas: 21G x 1 (0.80mm x 25mm),
21G x 1 ½ (0.80mm x 38mm).



Agujas para Extracción de Sangre 22G
Color: Negro.
Medidas: 22G x 1 (0.70mm x 25mm).

Medidas y presentaciones comerciales:

Medidas	Color	Agujas	Presentación
21G x 1 0.80mm x 25mm	●		Caja máster x 5.000 unds
21G x 1 ½ 0.80mm x 38mm	●		Caja máster x 5.000 unds
22G x 1 0.70mm x 25mm	●		Caja máster x 5.000 unds


*Consulte disponibilidad de referencias con su ejecutivo comercial Norstray & Nuart.

Partes de las Agujas para Extracción:

El diseño y la composición de las Agujas para Extracción M&H CARE, reducen considerablemente los posibles riesgos de contaminación, ya que el extremo distal de la aguja se cierra herméticamente cada vez que se extrae un tubo.

Las Agujas M&H CARE se ajustan perfectamente a los tubos de la línea DIAGNOSTICS, permitiendo un flujo sanguíneo constante y asegurando resultados consistentes.

- 1. Funda de goma
- 2. Tapa Protectora
- 3. Cubo de Aguja
- 4. Tubos de Aguja
- 5. Tapa Protectora

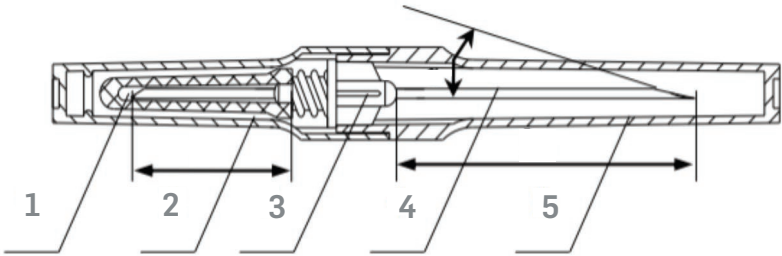

Línea Preanalítica

DIAGNOSTICS

M&H CARE | MEDICAL AND HOSPITAL CARE

 **Norstray & Nuart**

Colombia

Tv. 93 # 51 - 98, Bodega 73A,
Parque Empresarial Puerta del Sol,
Bogotá, Colombia.

Calle 75 N° 72 - 40,
Parque Empresarial Metrotex, Bodega 4,
Barranquilla, Colombia.

info@norstraynuart.com
www.norstraynuart.com